





Báscula inteligente Sharon con Bluetooth





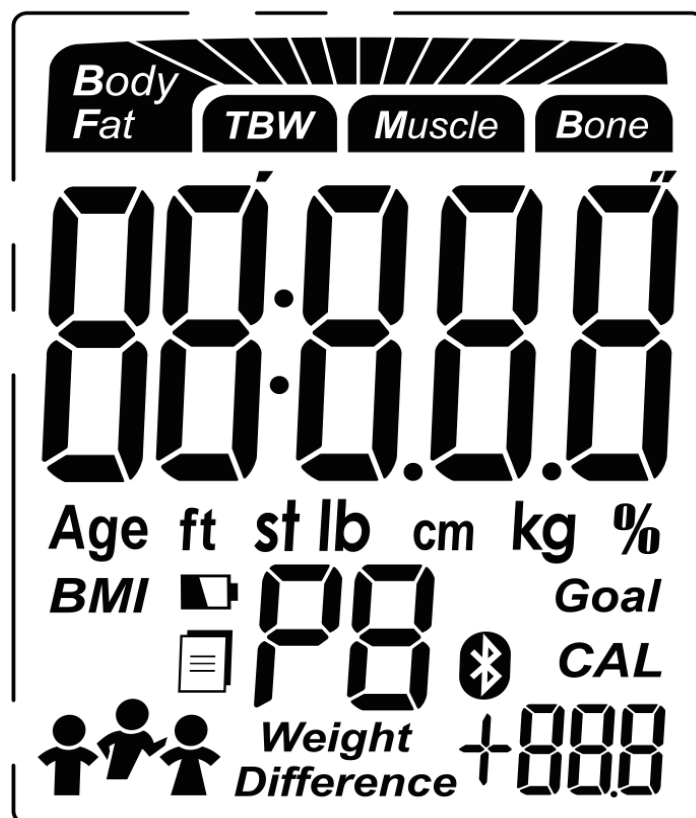


Product number: LH67301

PANTALLA LCD





SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Resultado del análisis de grasas corporales	%	Porcentaje
	Resultado total del análisis de agua corporal		Hombre
	Resultado del análisis de la masa muscular		Atleta: hombre
	Resultado análisis de la densidad ósea		Mujer
Age	Edad		Atleta: mujer
ft	Medida en <i>foot</i> : 0,304 8m	P8	Identificación de usuario (P1-P8)
st lb	Stone (Unidad de masa Reino Unido)	CAL	Resultado análisis de calorías
lb	Libra (Unidad de masa USA)	BMI	Índice de masa corporal


CM	Centímetros		Batería baja
kg	Kilogramos	Goal	OBJETIVO
Weight Differenc	Diferencia con el peso a alcanzar		Más del peso a alcanzar
	Menos del peso a alcanzar		Conexión Bluetooth correcta
	Transmisión de datos/ pendiente de transmitir al sistema inalámbrico		

INTRODUZCA LAS PILAS

1. Abra el compartimento de las pilas.
2. Introduzca las pilas (3x1.5V AAA) dentro del compartimento según las indicaciones de la polaridad marcadas en el interior. (Los dígitos "8888" aparecerán en la pantalla LCD.)
3. Cierre el compartimento y espere hasta que en la pantalla LCD aparezcan los dígitos "0.0".

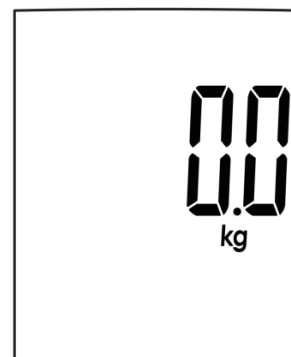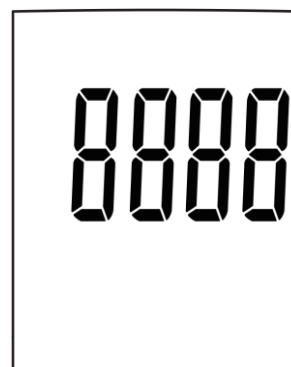

Precaución:

* Si aparece este símbolo  , la báscula se apagará en 3s. En este momento usted debe reemplazar las pilas por unas nuevas. Por favor, a la hora de reemplazar las pilas, cambie las pilas al mismo tiempo y no intente mezclar pilas antiguas con unas nuevas.


- * Las baterías vacías NO deben almacenarse en casa. Por favor, llévalas a un punto limpio.
- * Si no va a usar la báscula durante un tiempo prolongado, es aconsejable retirar las pilas antes.

CONFIGURE SU PERFIL


La báscula almacena múltiples usuarios (hasta 8). Siga las instrucciones más abajo para asignar una Identificación de usuario y configure su propio perfil, incluyendo Sexo, Estatura, Edad y el Peso a alcanzar.


1. Asignar una Identificación de usuario

- Con las pilas insertadas, presione el botón “SET” para comenzar la configuración.
- El sistema requerirá seleccionar primero la Identificación de usuario. Vea imagen abajo, “P1” parpadea. Usted puede presionar el botón “up” o “down” para seleccionar al usuario entre P1 y P8.
- Presione el botón “SET” para confirmar la Identificación de usuario

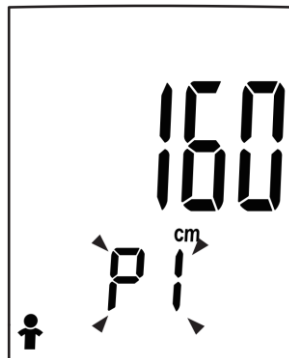

2. Asignar Sexo

- Tras confirmar la Identificación de usuario, el sistema pasará automáticamente a seleccionar el Sexo.
- Vea imagen abajo, el muñequito “” parpadea. Usted puede presionar los botones de las funciones para seleccionar el Sexo (Hombre/Mujer/Hombre atleta/ Mujer atleta).
- Presione el botón “SET” para confirmar el sexo.

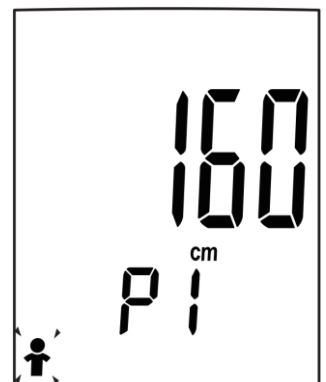


Modo atleta:

Un atleta se define como un adulto quien realiza una intensa actividad física de aproximadamente 12 horas a la semana y quien tiene una frecuencia cardíaca en reposo de aproximadamente 60 latidos o menos, por minuto.

3. Asignar Estatura


- Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará automáticamente a seleccionar la Estatura.
- Vea imagen abajo, el dígito “160” parpadea. Usted puede presionar los botones de las funciones de nuevo para aumentar o disminuir el número. (Rango: 100 cm a 220 cm/ 3’3.5”~7’2.5” ft (pies))
- Para cambiar más rápido el número puede presionar el botón “Up” o “Down”.
- Presione el botón “UNIT” para seleccionar entre ft (pies) o cm (centímetros).
- Presione el botón “SET” para confirmar la Estatura.

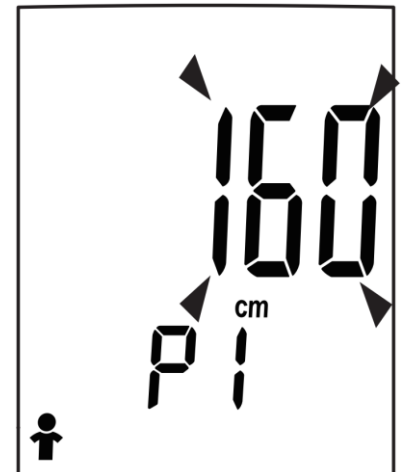

4. Asignar Edad

Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará automáticamente a seleccionar la Edad.

- Vea imagen al lado, el dígito “30” parpadea. Usted puede presionar los botones de las funciones de nuevo para aumentar o disminuir el número. (Rango de Edad para modo normal: 10 a 85 años)

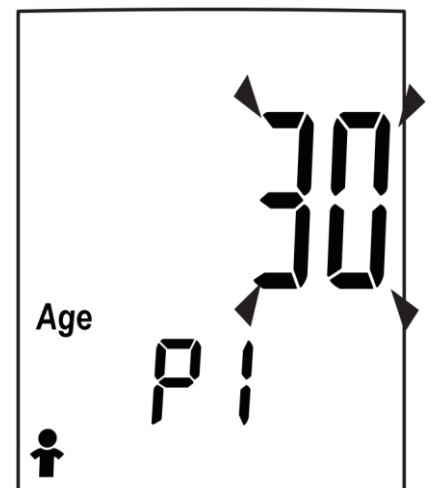

5. Asignar OBJETIVO


- Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará automáticamente a seleccionar El objetivo/peso a alcanzar.
- Vea imagen al lado, el dígito “50.0” parpadea. Para aumentar o disminuir el número más rápido puede presionar el botón “Up” o “Down”.
- Usted puede presionar el botón de las funciones para cambiar el número más rápido.
- Presione el botón “SET” para confirmar el OBJETIVO
- Cuando vea en la pantalla LCD “0.0kg”, usted puede empezar a pesarse.




CONEXIÓN CON SU DISPOSITIVO

Desde la Tienda APP o Tienda de Google Play Store descargue e instale la aplicación MedM Health en su dispositivo móvil que soporte la tecnología Bluetooth 4.0.


1. Encienda el Bluetooth y también la aplicación. Asegúrese de que ambos están encendidos durante el proceso de conexión.
 2. Presione el botón “UNIT” en la parte trasera de la báscula para comenzar la conexión.
- Estos símbolos aparecerán en la pantalla LCD . La conexión está en proceso.

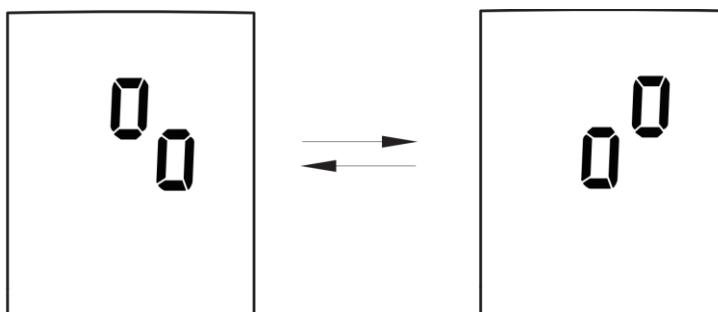

- Si la conexión es correcta, este símbolo aparecerá en la pantalla LCD.

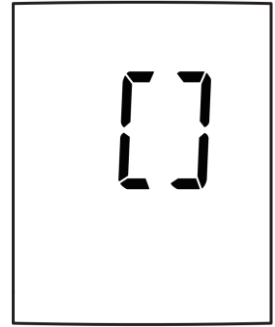


- Si la conexión falla, el símbolo "E1" aparecerá en la pantalla LCD.

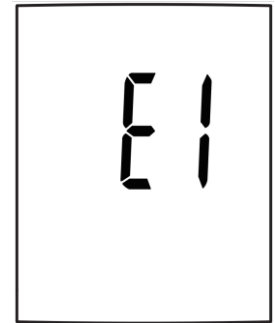

UNIDAD DE SELECCIÓN DE MEDIDAS


Con las pilas insertadas, presione el botón "UNIT" en la parte trasera de la báscula para seleccionar la unidad de medidas. La medida preseleccionada por defecto es "kg". Presione el botón "UNIT" para seleccionar las otras medidas "st lb" (medidas americanas) "lb" (medidas inglesas).

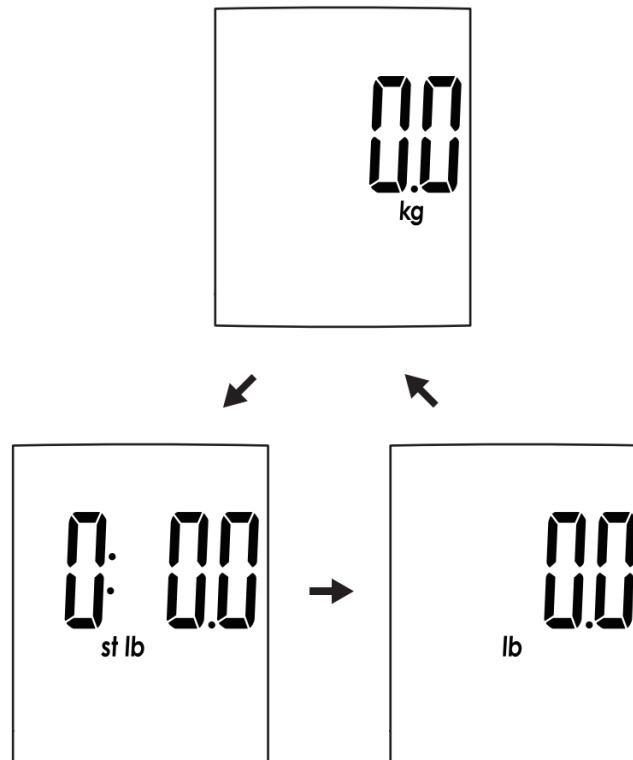

ENCENDER LA BÁSCULA

1. Presione con un pie el centro de la báscula.
2. "0.0" aparecerá en la pantalla.
3. La báscula está lista para su uso.


El proceso de encendido debe ser repetido si usted mueve la báscula.

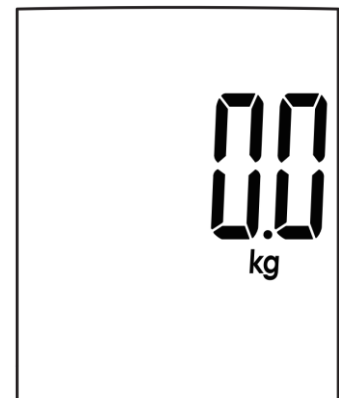

¿CÓMO PESARSE?

Su Báscula inteligente Sharon con Bluetooth funcionará como una báscula convencional. Una vez la haya configurado como previamente le hemos indicado, simplemente súbase a la báscula y mida su peso actual.


1. Sitúe la báscula en el suelo en una superficie dura. Si el suelo está desnivelado o usted pone la báscula sobre una alfombra, las mediciones pueden no ser precisas.
2. Súbase a la báscula y quédese quieto mientras la báscula mide su peso.
3. En la pantalla podrá ver su peso actual.

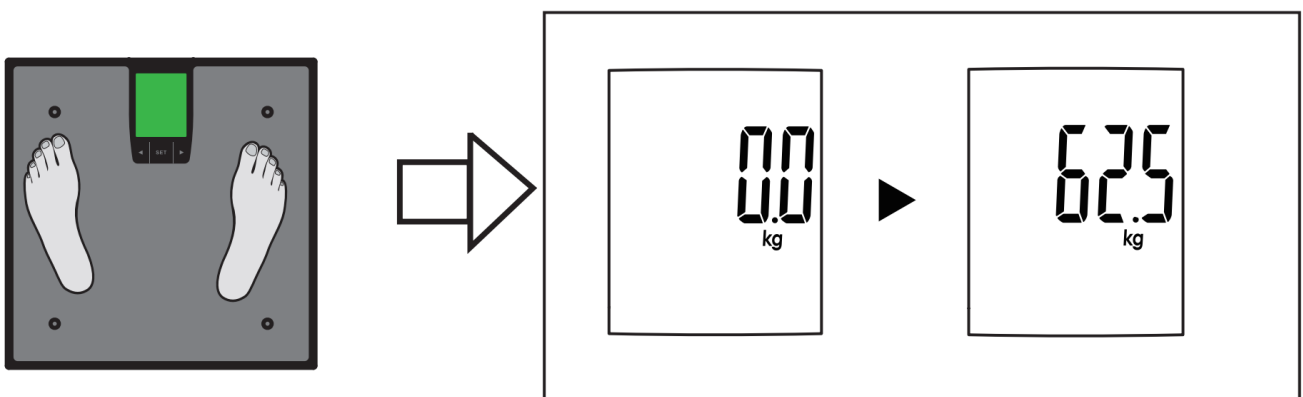

4. La báscula se apagará automáticamente tras unos segundos. Presione “SET” o “UNIT” para encenderla de nuevo.

INDICADOR DE GRASAS CORPORALES

La barra de progreso en la parte superior del LCD también funciona como indicador de su actual nivel de grasas corporales. Cuando el resultado del análisis se muestre en la pantalla, la longitud de la barra que varía, indicará los diferentes niveles de grasa corporal.

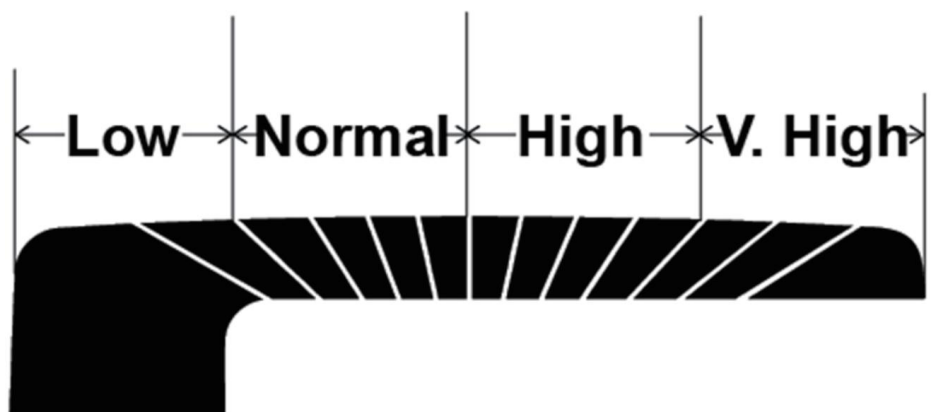


COMIENZE LA MEDICIÓN


1. Primera medición

Por favor, configure primero al usuario antes de comenzar a medirse.


Paso 1: Presione el botón “SET”, seleccione a su usuario y súbase a la báscula. Importante: para una medición exacta, debe subir descalzo.

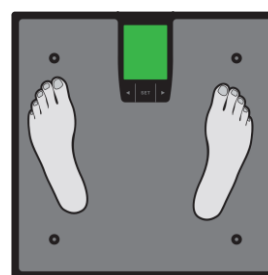

Paso 2: Permanezca quieto y mantenga el contacto con la báscula hasta que el LCD deje de mostrar los resultados en movimiento .

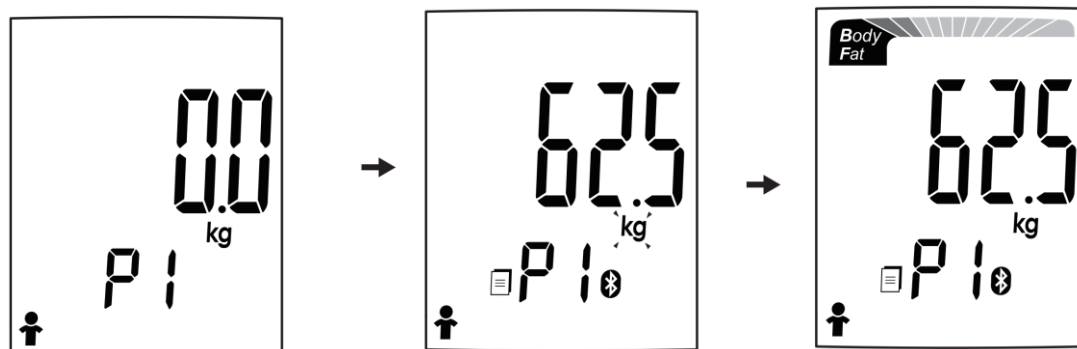


Paso 3: Los resultados de medición aparecerán en la pantalla de forma secuencial tres veces: índice de grasa corporal, índice de agua en el cuerpo, masa de los músculos, masa ósea , IMC y las supuestas calorías consumidas al día.

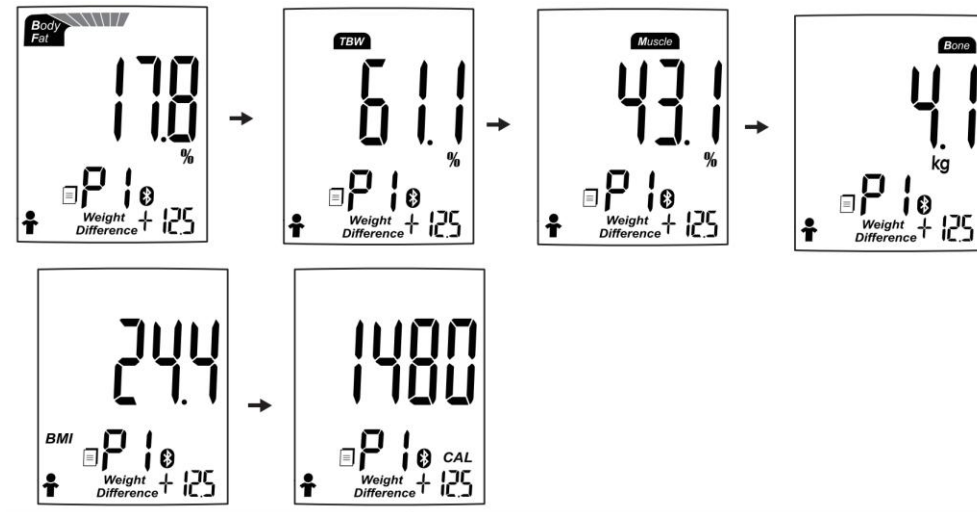


- Si el análisis no se completa, el LCD sólo mostrará los datos del peso. (Las soluciones de los problemas podrá encontrarlas al final del manual).

2. Mediciones diarias


- Con la tecnología original SENSE ON, la báscula inteligente se encenderá en cuanto pise la báscula con un pie descalzo.
- Permanezca quieto y mantenga el contacto con la báscula hasta que el LCD deje de mostrar los resultados en movimiento.

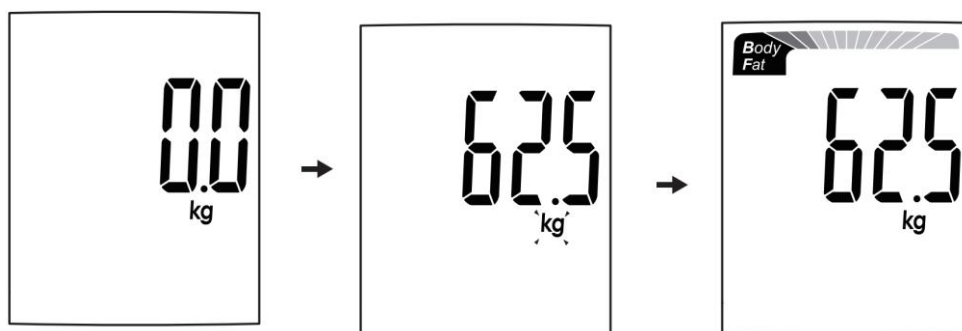

- Según los resultados del análisis, el sistema reconocerá automáticamente al posible Usuario, con los registros similares. Entonces los resultados del análisis aparecerán en la pantalla tres veces de forma secuencial.

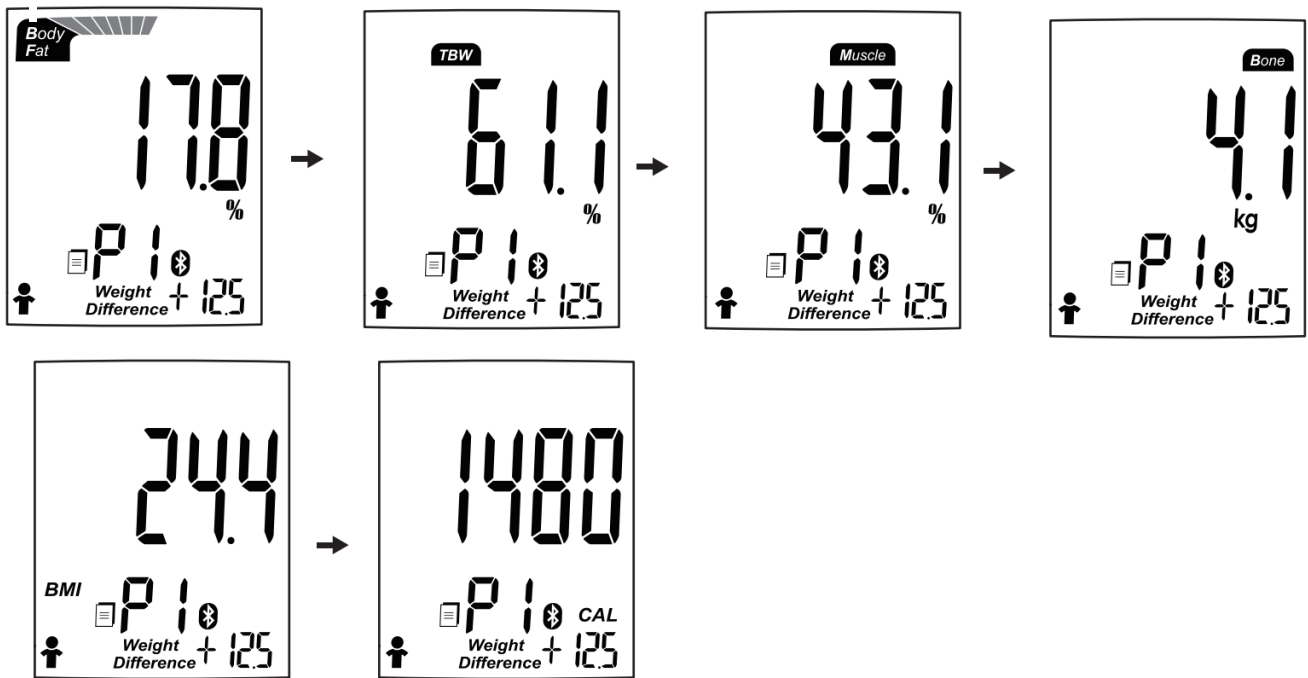

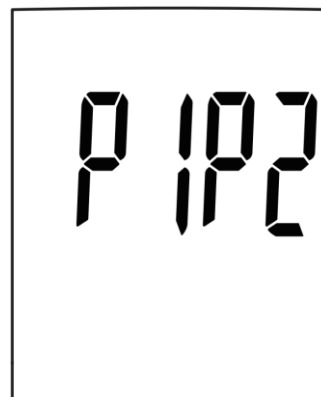


- Si el sistema detecta a dos o más usuarios con registros similares, le permitirá escoger, por ejemplo entre, P1 y P2. Usted puede seleccionar al usuario correcto. Los resultados del análisis serán añadidos al usuario que haya seleccionado y los resultados se mostrarán tres veces de forma secuencial.





- Si el sistema no selecciona al posible usuario el LCD sólo mostrará los datos del peso (Las soluciones de los problemas podrá encontrarlas al final del manual)

TRANSMISIÓN DE DATOS

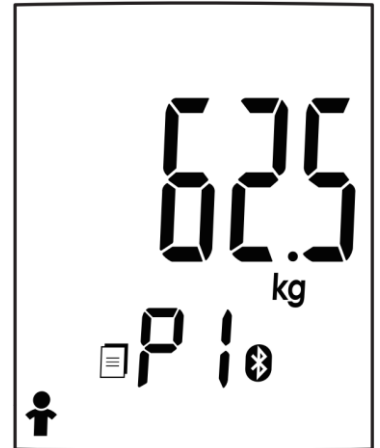- Si la báscula se ha conectado correctamente con su móvil, los datos serán enviados al mismo vía Bluetooth.
- Sólo si los resultados del análisis se adjudican a un usuario, la báscula enviará los datos al móvil después de la medición.
- El símbolo  desaparecerá tras una correcta transmisión de datos y usted podrá comprobar los datos de salud almacenados en su teléfono móvil.
- Si la transmisión de datos falla, el símbolo  permanece en la pantalla. Los datos de medición que no se hayan enviado al móvil, quedarán temporalmente almacenados en la báscula y se enviarán a su móvil tras completar un nuevo análisis.



	Conexión Bluetooth correcta
	Transmisión de datos: - Este símbolo desaparece si la transmisión es correcta; - Este símbolo permanece encendido si la transmisión falla.




MANTENIMIENTO

Durante el mantenimiento y limpieza de la báscula, asegúrese de seguir estos consejos:

- * Por favor, utilice un trapo seco y suave para limpiar el polvo.
- * Por favor, utilice un trapo húmedo y suave, para limpiar la suciedad. Entonces, utilice uno seco para dejar seca la superficie de la báscula.
- * Por favor, no lave la báscula con agua ni la introduzca en un cubo con agua. Abundante agua podría dañar la báscula, esto no lo cubre la Garantía.
- * Por favor, no use productos de limpieza abrasivos u otros para limpiar la báscula, esto podría causar daño total o malfuncionamiento de la báscula. Esto no lo cubre la Garantía.
- * Por favor, no desarme la báscula. Si tiene cualquier problema u pregunta, contáctenos a es@leicke.com
- * Por favor, no ponga las baterías cerca del fuego. Las baterías podrían explotar o el líquido químico interior podría salirse. Retire las baterías si no va a utilizar la báscula durante un tiempo prolongado.

PREGUNTAS FRECUENTES

Error

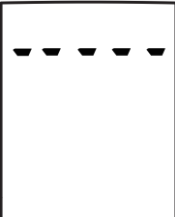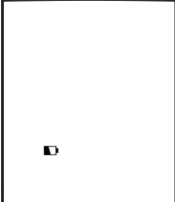Error	Descripción	Posible solución
	Sobrecarga de peso máximo. La báscula se apagará en seguida.	Por favor, deje de utilizar la báscula.
	Batería baja. La báscula se apagará en seguida.	Por favor, cambie las tres baterías por una nuevas. Es importante que no mezcle baterías nuevas con las viejas.
	Error al sincronizar la báscula con su teléfono móvil.	Por favor, compruebe si el Bluetooth y la aplicación están encendidos. Compruebe que los dispositivos estén en el alcance de transmisión por Bluetooth.

Problema	Causa	Posible solución
Error de transmisión de datos.	Bluetooth está apagado	Encienda el Bluetooth en la configuración de su móvil
	La aplicación está apagada.	Presione el icono de la aplicación en su terminal móvil.
	Fuera del alcance de la transmisión por Bluetooth	Sitúe su teléfono móvil más cerca de la báscula.
	Ningún usuario reconocido.	Por favor, asigne una Identificación de usuario siguiendo las instrucciones de <u>Configure su perfil</u>

PREGUNTAS FRECUENTES

Problema	Causa	Posible solución
Resultados de medición absurdos: - Demasiado altos; o - Demasiado bajos; o - Gran diferencia entre dos mediciones recientes.	Postura incorrecta	Por favor, suba a la báscula descalzo y quédese quieto.
	La báscula está situada en una superficie blanda como p.ej una alfombra.	Sitúe la báscula en el suelo en una superficie dura.
	Sus manos o sus pies están demasiado secos.	Antes de subir a la báscula, pase una toalla húmeda por sus palmas y las suelas.
Cuando enciende la báscula el LCD no se ilumina.	Las pilas aún no están introducidas.	Introduzca las pilas.
	Pilas defectuosas.	Por favor introduzca las tres pilas a la misma vez. Por favor, utilice solo las pilas adecuadas
No consigo analizar las calorías, el IMC, la grasa corporal, el agua corporal, la masa muscular o la masa ósea.	Usted se sube con calcetines o zapatos a la báscula.	Por favor, suba a la báscula descalzo y mantenga el contacto completo de los pies con los electrodos.
	El sistema no reconoce al posible usuario con los datos similares	Por favor, asigne una Identificación de usuario siguiendo las instrucciones de <u>Configure su perfil</u>
	El usuario no puede seleccionar su correcta Identificación de usuario.	Por favor, asigne una Identificación de usuario siguiendo las instrucciones de <u>Configure su perfil</u>
La báscula se apaga	Baterías bajas.	Por favor introduzca las tres pilas a la misma vez. Por favor, utilice solo las pilas adecuadas

CONTACTO

Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos a.

PRODUCTION & WHOLESALE

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28

04103 Leipzig

Germany

Web: www.leicke.com

Mail: es@leicke.com

Escriba un email y estaremos encantados de ayudarle.